


HT-820D KULLANIM KILAVUZU

Bu ürün infrared ışınım aracılığı ile temassız ateş ve sıcaklık ölçümü için kullanılabilir. Ürünün 2 farklı ölçüm modu vardır: vücut sıcaklığı ve yüzey sıcaklığı. Geçmiş 34 ölçümü hafızasında saklayabilir ve ayarlanan belirli bir sıcaklıkta alarm verebilir. Farklı ölçüm aralıkları farklı renklerde led ışıklar ile gösterilmektedir.

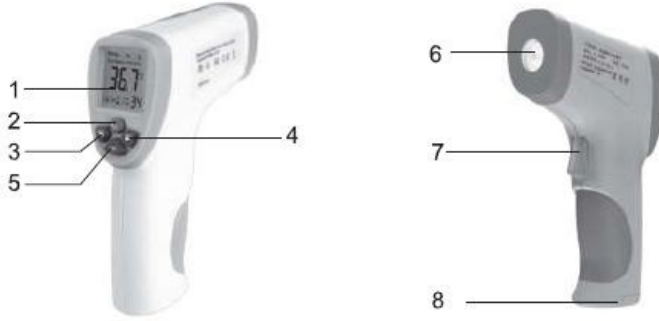

1. LED ekran, ölçüm değerlerini gösterir
2. Ekran aydınlatmasını açıp kapatır
3. Sol tuş: Kaydedilen ölçüm değerlerini görmeye yarar. Ayrıca ayar modunda kullanılır
4. Sağ tuş: Kaydedilen ölçüm değerlerini görmeye yarar. Ayrıca ayar modunda kullanılır
5. MODE tuşü ölçüm modunu değiştirmek için kullanılır
6. Bu bölüm ölçüm yapılacak yere dik bir şekilde tutulmalıdır
7. Ölçüm tuşü
8. Pil yuvası kapağı

Özellikler:

Saklama sıcaklığı	-10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F)
Çalıştırma sıcaklığı	+10 ~ 40 °C (50 ~ 104 °F)
Güç	3V
Ağırlık	122 gr.
Boyutlar	145 x 80 x 40 mm

Teknik Özellikler:

Ölçüm aralığı	32 ~ 43 °C (90 ~ 109 °F)
Ölçüm doğruluğu	±0.3 °C (±0.6 °F)
Yüzey ölçüm aralığı	0 ~ 100 °C (32 ~ 212 °F)
Yüzey ölçüm doğruluk payı	±1 °C (±1.8 °F)
Tepki zamanı	0.5s
Çözünürlük	0.1°C (0.1 °F)
Ölçüm mesafesi	5 ~ 8 cm
Otomatik kapanma	7s

Standartlar:


EN 12470-5:2003
93/42/EEC

Ayarlar:

SET tuşuna basılı tuttuğunuzda ayar moduna geçersiniz. Tuşa her kısa basışınızda ürün F1, F2 ve F3 ayar modu arasında geçiş yapacaktır.


F1: Birim ayarlama

Bu ayar modunda °C ve °F birimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

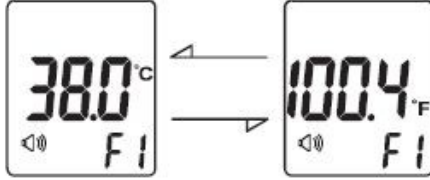


F2: Sıcaklık kalibrasyon modu

Dikkat! Bu ürün fabrikadan kalibre edilerek gelmektedir. Bu ayar modunu cihazın ölçümünde bir farklılık olduğuna %100 eminseniz yapınız . Gerekli olması durumunda bunu sertifikalı bir kalibrasyon laboratuvarına yaptırınız. Aralık: ±5 °C (±9 °F)

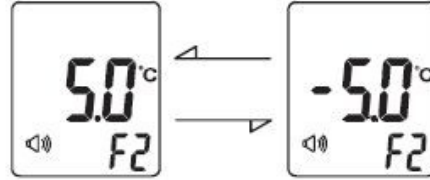

F3: Ses açma kapama

F3 ayarı sesi açıp kapatmaya yarar

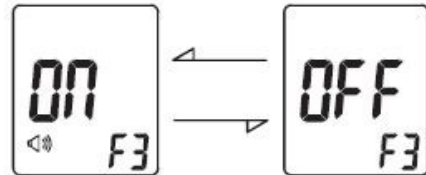

MODE Tuşu

MODE tuşuna basılı tutarak İngilizce ve Çince dilleri arasında geçiş yapabilirsiniz

MODE tuşuna her bastığınızda Vücut ve Yüzey sıcaklığı arasında geçiş yapabilirsiniz. Vücut sıcaklığı modunda ekranda "Body" kelimesi görünecektir. Yüzey sıcaklığı ölçüm modunda vücut sıcaklığı ölçümü yapmayınız.

Sıcaklık ölçümü:

Yüzy sıcaklığı ölçüm modunda cihazı ölçüm hedefine doğru tutarak tetiğe basınız.

Vücut sıcaklığı ölçüm modunda tetiğe basılı tutarsanız cihaz sürekli ölçüm yapacak ve ekran aydınlatması yanacaktır.



Vücut sıcaklığı ölçümü:

Farklı ölçüm aralıkları farklı led renkler ile belirtilmiştir.

37 °C altında = YEŞİL

37.5 °C ~ 38 °C arasında = TURUNCU


38 °C üzerinde = KIRMIZI




Kayıt fonksiyonu:

Kayıtları kontrol:

SET ve ADJ düğmeleri ile kayıtlar arasında gezebilirsiniz
ADJ düğmesine basılı tutarsanız mevcut kayıt silinecektir

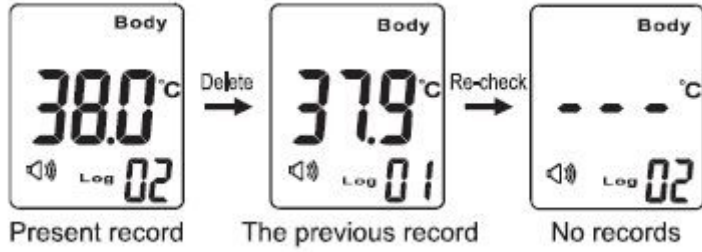

ADJ ve SET düğmelerine aynı anda basarsanız tüm kayıtlar silinecektir

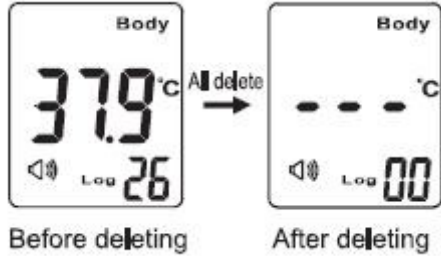

Pil değiştirme:

Pil zayıfladığında ekranda pil simgesi belirecektir. Lütfen yeni ve uygun piller ile değişim yapınız.



Dikkat edilmesi gereken hususlar:

1. Ürünü alna dik bir şekilde bakacak şekilde 5cm uzaklıktan tutunuz. Vücut sıcaklığı kulak arkasından da ölçülebilir
2. Ölçüm yaparken alında saç olmadığına emin olunuz
3. Lens üzerindeki cam ürünün en hassas bölümüdür, dikkat ediniz. Camı pamuklu bez ve %70 alkol ile temizleyebilirsiniz.
4. Belirtilen piller dışında pil kullanmayınız ve uzun süre kullanılmayacağı durumlarda pilleri çıkartınız.
5. Ürünü direkt güneş ışığı ve sudan koruyunuz
6. Ölçümü en fazla **5-8 cm** uzaklıktan yapınız
7. Üst üste çok kısa aralıklar ile ölçüm yapmayınız. En az 15 saniye bekleyiniz.
8. Ekranda **HI** yazarsa ölçüm aralığından yüksek **LO** yazarsa ölçüm aralığından düşük bir değer okunmuş demektir.